TraumaBox

PRZYGOTOWANIE ZESTAWU


Instrukcja do ćwiczeń • 12 kroków




1 Wlej do butelki **750 ml wody.**




2 Wsyp 1 dawkę proszku (saszetka / łyżeczka).

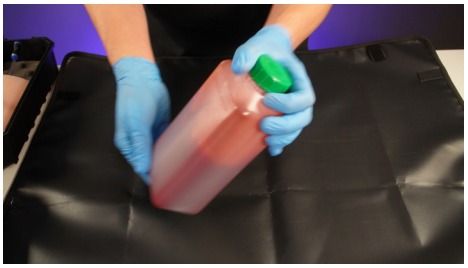


3 Dokładnie wymieszaj.

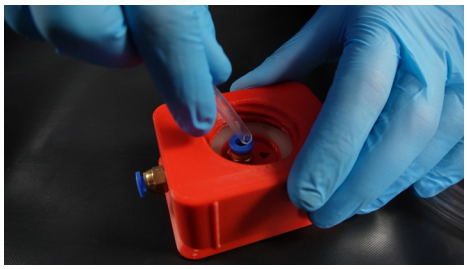

4 Włóż krótki wężyk do czerwonego korka.*

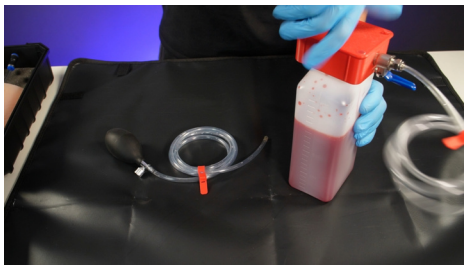

5 Nakręć korek na butelkę.

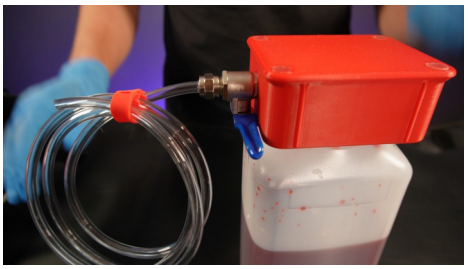


6 Zamknij zawór przy korku.




7 Podłącz pompkę do korka.*




8 Zakręć zawór na gruszce.

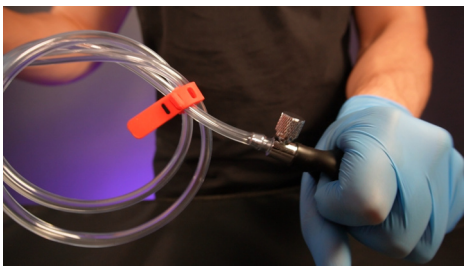


9 Naciśnij gruszkę **3 razy.**

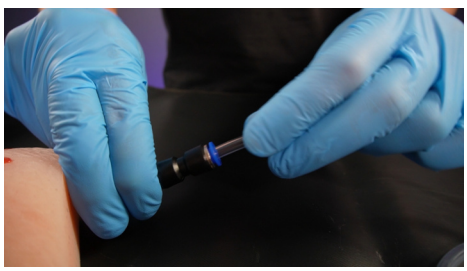

10 Podepnij ranę.*

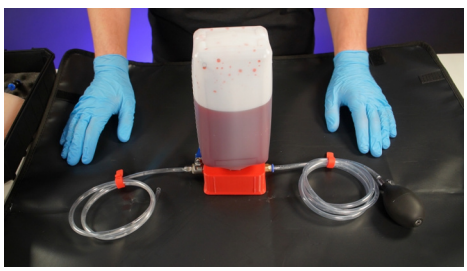

11 Odwróć butelkę. Naciskaj gruszkę aż uzyskasz wymagane ciśnienie.

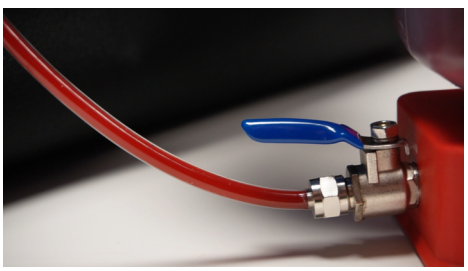

12 Powoli otwieraj zawór do uzyskania pożądanego wypływu z rany.

*** Upewnij się, że wężyki są wciśnięte do oporu**